

SIMPLY

EASY



BEAUTY N HEALTH

The Supra and Perio double effect

Deutsch

EQUIPMENT
ACTEON

Airpolishing

Frische
Aktive Verlaufskontrolle von
Parodontalerkrankungen

Einfach



Zuverlässigkeit

Einfacher Umbau

Prävention

Flexibilität

Komfort

Kompatibilität

MDL

EINE KOMPLETTE LÖSUNG

Vier Düsen zur aktiven Verlaufskontrolle von Parodontalerkrankungen. Einfach Düse wechseln - ein Handstückwechsel ist nicht nötig

Pulversorten für jede klinische Situation:

- „CLASSIC“-Pulver auf Basis von Natriumbikarbonat
- „PEARL“-Pulver auf Basis von Kalziumkarbonat
- „PERIO“-Pulver auf Basis von Glyzin



wird jetzt noch einfacher mit

air N GO
easy

Erleben Sie die neueste Generation Airpolisher-Handys mit Doppelfunktion von ACTEON® EQUIPMENT:

- **SUPRA** für die prophylaktische supragingivale Politur
- **PERIO** für subgingivales Polieren: Prävention sowie Behandlung von Parodontalerkrankungen und Periimplantitis

Dieses zahnmedizinische Produkt verbindet Einfachheit mit Leistungsstärke.

Bakterielle Dekontaminierung
Größere Bewegungsfreiheit
Einfachheit
Supra
Perio



**EIN HANDSTÜCK FÜR
VERSCHIEDENE PFLEGEBEHANDLUNGEN**

AIR-N-GO® easy kombiniert essentielle Funktionen mit einer hohen Zuverlässigkeit und erleichtert Ihnen somit den Praxisalltag enorm.

- Schnelles Einschalten: Direktverbindung zum Highspeed-Handstückanschluss
- Größere Bewegungsfreiheit: 360°-Drehung; schnelle und zielgenaue Behandlung pflegebedürftiger Zahnflächen
- Einfachere Reinigung des Handstücks durch leichtes Auseinandernehmen

Design
Sicherheit
Behandlung von
Periimplantitis
Leistungsstärke
Patientensicherheit

AIR-N-GO -Düsen:

Ihre Verbündeten bei der Vorbeugung und Bekämpfung von Parodontalerkrankungen

Durch modernste Modellertechniken in der Fluidodynamik konnten Düsen geschaffen werden, die einen kontinuierlichen, zielgenauen und kontrollierten Sprühwasserstrahl erzeugen – und zwar punktgenau dort, wo Sie ihn benötigen.

Im Praxisalltag lassen sich mithilfe der leistungsstarken AIR-N-GO®-Düsen supra- und subgingivale Biofilme wirksam entfernen.

AIR-N-GO® SUPRA Düse (Standard)

- Bewährte Lösung für die supragingivale Prophylaxe in Kombination mit den AIR-N-GO®-Pulversorten „CLASSIC“ oder „PEARL“
- Garantiert eine schnelle, effiziente Behandlung mit höherem Arbeitskomfort



Klinischer Fall Dr. P. ROUAS (Frankreich)




AIR-N-GO® PERIO MAINTENANCE Düse (optional)

- Reduzierter Verbrauch von feinteiligem AIR-N-GO® „PERIO“-Pulver in der Erhaltungsphase
- Mukositis-Behandlung für eine klinisch gesunde Mundschleimhaut
- Wirksame Bekämpfung von fortschreitenden Parodontalerkrankungen



Klinischer Fall Dr. C. LIM (U.K.)

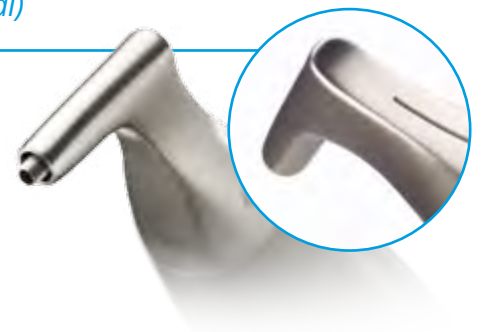



AIR-N-GO® PERIO EASY Düse (optional PERIO easy Kit)

- Innovatives „Schuhlöffel“-Design zum einfachen subgingivalen Einführen
- Ein echter Pluspunkt bei der nicht-operativen subgingivalen Zahn- und Implantatbehandlung (3 bis 8 mm tiefe Zahnfleischtaschen)
- Behandlungszeit pro Fläche nur 5 Sekunden



Klinischer Fall Dr. C. LIM (U.K.)

AIR-N-GO® PERIO Düse (optional)

- Operative und nicht-operative subgingivale Behandlungen (Tunnelierung und Lappen)
- Doppelter seitlicher Sprühwasserstrahl mit hoher Leistungsstärke
- Dekontaminierung tiefer Zahnfleischtaschen (8 bis 10 mm)



Klinischer Fall Dr. A. PATEL (U.K.)

AIR-N-GO® -Pulver:

Maßgeschneiderte Lösungen für jede klinische Anforderung

AIR-N-GO®-Pulver wurden speziell für die wirksame und gleichzeitig sanfte Behandlung von Zahnoberflächen entwickelt und getestet. Alle Pulver sind mit dem AIR-N-GO easy Handstück kompatibel, sodass kein Instrumentenwechsel erforderlich ist.

AIR-N-GO® „CLASSIC“-Pulver auf Basis von Natriumbikarbonat ($\approx 76 \mu\text{m}$)

- Verschiedene Geschmäcker je nach Vorliebe Ihrer Patienten
- Behutsame Reinigung mit sofort sichtbaren Ergebnissen
- Wirksames Entfernen von Verfärbungen und bakterieller Plaque selbst von schwer zugänglichen Flächen
- Verbesserte Behandlungsakzeptanz: geringere Blutungen, weniger Schmerzen für den Patienten

100% NATÜRLICHE FRISCHE



5 frische Geschmacksrichtungen auf Basis von 100 % natürlichen Aromen oder ätherischen Ölen: Neutral, Cola, Himbeere, Pfefferminze oder Zitrone

**KONKURRENZ-
ANBIETER**

AIR-N-GO




Geschichtete Partikel mit aggressiver Geometrie (x1000)



Behandelter Zahnschmelz weist zahlreiche Kratzer auf (x300)



Partikel mit weicherer Geometrie (x1000)

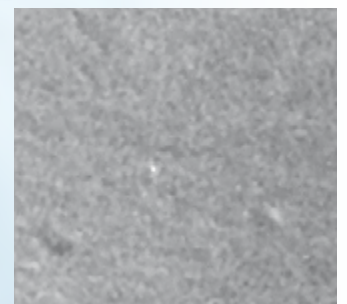


Behandelter Zahnschmelz: die Oberfläche weist keine Kerben oder Kratzer auf (x300)

AIR-N-GO® „PEARL“-Pulver auf Basis von natürlichem Kalziumkarbonat ($\approx 55 \mu\text{m}$)

- Ultra-aktive supragingivale Politur und Schutz von empfindlichem Gewebe
- Verringerung der Übersäuerung infolge von Gewebsentzündungen für eine klinisch gesunde Mundflora
- Wiederherstellung des natürlichen Perlmutterglanzes des Zahnschmelzes
- Rasche und sichere Entfernung von hartnäckigen Verfärbungen und Verbundstoffen

Selbst die schmerzempfindlichsten Patienten mit fortgeschrittener Zahnfleischentzündung profitieren von der Behandlung mit „PEARL“.

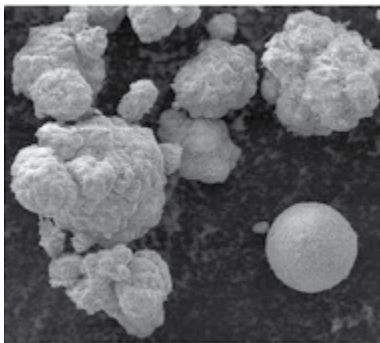

AIR-N-GO® „PEARL“ (x1000)

Quelle: ICMCB CNRS (Institute of Condensed Matter Chemistry - French National Centre for Scientific Research), Fotos M.E.B.

HIGH PERFORMANCE



AIR-N-GO® „PERIO“-Pulver auf Basis von natürlichem Glyzin ($\approx 25 \mu\text{m}$)

- Einsatz ausschließlich zur subgingivalen Therapie in Ergänzung zur Erstbehandlung
- Optimaler Erhalt der behandelten Oberflächen (Zähne und Implantate) und empfindlicher Bereiche durch die geringe Abrasivität
- Verhindert die Zunahme des subgingivalen Biofilms

GRÜNDLICHE SUBGINGIVALE THERAPIE

Einzigartige Eigenschaften und zahlreiche Vorteile:

- Plaqueentfernung in der parodontalen Erhaltungsphase an freigelegten Wurzeloberflächen ohne Substanzverlust
- Reduktion der Bakterienlast in den Zahnfleischtaschen










AIR-N-GO® „PERIO“ (x1000)

Quelle: ICMCB CNRS (Institute of Condensed Matter Chemistry - French National Centre for Scientific Research), Fotos M.E.B.



Vereinfachte Instandhaltung und Pflege

GO SUPRA

	Düse	Pulver	Indikationen
	 <p>AIR-N-GO® SUPRA EASY 120° Im Lieferumfang enthalten</p>	 <p>„CLASSIC“ Auf Basis von Natriumbikarbonat Durchschnittliche Partikelgröße 76 µm GESCHMÄCKER: Zitrone, Pfefferminze, Himbeere, Cola und Neutral</p>	<p>Nachbearbeitung im Anschluss an die Zahnsteinentfernung</p> <p>Vorbereitung für die Zahnweißung</p> <p>Reinigung von Interdentalräumen, Fissuren und Rissen</p> <p>Vorbereitung der Zahnoberfläche für das Ätzen</p> <p>Reinigung von Zahnsparungen</p> <p>Entfernen von supragingivalen Biofilmen, Plaque, Verfärbungen und provisorischen Zementresten</p>
		 <p>„PEARL“ Auf Basis von Kalziumkarbonat Durchschnittliche Partikelgröße 55 µm GESCHMACK: Neutral</p>	<p>„Ultraschnelle“ und sanfte Entfernung von hartnäckigen Verfärbungen und Verbundstoffen</p> <p>Anmerkung: Enthält kein Natrium und kann daher zur Behandlung von schmerzempfindlichen und sich salzarm ernährenden Patienten eingesetzt werden</p>
<h2>GO PERIO</h2> <p>Zähne und Implantate</p>	 <p>AIR-N-GO® PERIO EASY Wird mit dem optionalen PERIO Kit geliefert</p>	 <p>„PERIO“ Auf Basis von Glyzin Durchschnittliche Partikelgröße 25 µm GESCHMACK: Neutral</p>	<p>Entfernung von subgingivalem Biofilm</p> <p>Behandlung von Parodontalerkrankungen und Periimplantitis</p> <p>Taschentiefe 3 mm – 8 mm</p>
	 <p>AIR-N-GO® PERIO Optional</p>		<p>Behandlung von Parodontalerkrankungen und Periimplantitis</p> <p>Taschentiefe 8 mm – 10 mm</p>
	 <p>AIR-N-GO® PERIO MAINTENANCE Optional</p>		<p>Parodontale Erhaltungsphase</p> <p>Taschentiefe bis zu 4 mm</p>

Besuchen Sie uns auch im Internet unter:
www.de.acteongroup.com



VERKAUFANGEBOT

Standard	AIR-N-GO® easy Koffer: AIR-N-GO® easy Handstück mit modellabhängigem Adapter (KaVo*, Sirona*, Bien-Air*, W&H*, Midwest*), 1x SUPRA 120° Düse, 1x Kennenlernkit mit 10x „CLASSIC“-Pulversticks in verschiedenen Geschmacksrichtungen und 2x „PEARL“-Pulversticks, 1x AIR-N-GO easy Kit zur Instandhaltung und Pflege (Spritze mit Silikonfett, Applikationszange für Silikonfett, Ersatzdichtungen, Spritze und Kanüle, Bohrer)
Optional	PERIO easy Kit: AIR-N-GO® PERIO easy Düse und 1x Flasche mit 100 g AIR-N-GO® „PERIO“-Glyzinpulver Einzellieferung: AIR-N-GO® PERIO Düse Einzellieferung: AIR-N-GO® PERIO Maintenance Düse

*KaVo, Bien-Air, W&H, Sirona und Midwest sind eingetragene Warenzeichen.