

PROPHYflex 4

Macht Pulverstrahlen zum reinsten Vergnügen.



Focus Open 2018 Gold

Ausgezeichnetes Produktdesign

Das KaVo PROPHYflex 4 hat den Focus Open 2018 Gold für sein herausragendes und zukunfts-fähiges Design gewonnen. Die Jury lobt die Balance des Handstücks in der Hand sowie die frischen Farben.



Drei Handstücke in einem: perfekt für supra- und subgingivale Anwendungen.


Es gibt viele Handstücke für eine Anwendung – und ein Handstück für fast alle Anwendungen: Das neue PROPHYflex 4 ist das Universalgenie in Ihrer Hand. Egal ob Sie im supra- oder subgingivalen Bereich arbeiten, es ist für jeden Zahn, für jeden Patienten und fast jede Indikation geeignet.

Supragingival.



Wohlfühlen liegt in Ihrer Hand.

Für eine ergonomische Handhaltung und ein ausbalanciertes, ermüdungsfreies Arbeiten können Sie die für Sie passende Handstücklänge wählen.

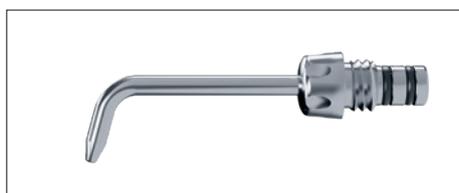

Absolute Flexibilität

Zwei supragingivale Kanülen für die super-sanfte bis kraftvolle Reinigung. Wählen Sie für jede Behandlung zwischen der Standard-Kanüle und der neu verfügbaren Power-Kanüle.



Reinste Freude steht im Fokus.

Der homogene und fokussierte Pulverstrahl der PROPHYflex Standard-Kanüle schont die Zahnschubstanz bei deutlich reduziertem Pulvernebel.



Innere Stärke zum Aufdrehen.


Mit der 3-Stufenregulierung bestimmen Sie die Reinigungswirkung selbst – von pulverfrei bis maximale Reinigungskraft.

Subgingival.



Macht Biofilm ein Ende.

Dank dem gebündelten Strahl arbeiten Sie extrem präzise und haben mit der Markierung analog Ihrer WHO-Sonde zugleich jederzeit die perfekte Übersicht in der Tasche.

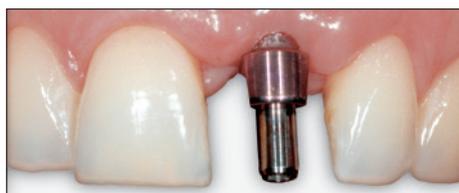

Genial universal durch den gebündelten Strahl.

Der perio tip ist subgingival, aber auch für die Reinigung von Implantaten, Kronen und Brücken sowie zur Entfernung von Verfärbungen an freiliegenden Zahnhälsen einsetzbar.

Perfekte Ergonomie war noch nie so flexibel...

Ihre täglichen Prophylaxebehandlungen sollen leichter, schneller, gründlicher und auch bei langen Sitzungen angenehmer werden? Das neue KaVo PROPHYflex 4 erfüllt alle Ihre Wünsche. Es ist federleicht, perfekt ausbalanciert und ergonomisch gestaltet – für Ihre innere Balance.

Die PROPHYflex Standard-Kanüle

Weniger störender Pulvernebel dank hochpräzisem Pulverstrahl zur sanften und schonenden Entfernung von Biofilm und Verfärbungen. Die schmale Form der Kanüle ermöglicht eine bessere Sicht bei der supragingivalen Reinigung.

Der PROPHYflex Perio-Aufsatz

Optionales Perio Kit für fokussierte und schonende subgingivale Behandlungen sowie die Reinigung von Brücken, Implantaten und Kronen.

Die PROPHYflex Power-Kanüle

Die Power-Kanüle entfernt selbst hartnäckige Verfärbungen im Handumdrehen.



Mit den besten Empfehlungen.

„Das neue PROPHYflex 4 überzeugt mich in meiner täglichen Arbeit, da es perfekt in der Hand liegt und durch die beiden Griffhülsenlängen individuell ausbalanciert ist. Außerdem ist der Spraynebel leichter kontrollierbar, was auch meinen Patienten gefällt.“

Tanja Wicharz

Prophylaxe-Expertin und Praxistrainerin

...und Flexibilität war noch nie so bequem.

Weil jede Hand, jede Behandlung und jeder Patient anders ist, lässt sich das KaVo PROPHYflex 4 individuell einstellen. Sie entscheiden, ob Sie sub- oder supragingival arbeiten, leichte oder starke Verfärbungen entfernen und wie lang das Handstück sein soll.

Für Sie maßgeschneidert.

Zwei in der Länge unterschiedliche Griffhülsen für den perfekten Sitz in Ihrer Hand. Ideal auch, wenn mehrere Behandler mit dem gleichen Handstück arbeiten. Die um 360° drehbare Griffhülse ermöglicht bequemes Arbeiten auch an schwer erreichbaren Stellen.

Entspannt bleiben – mit Leichtigkeit.

Sehr leichtes, individuell in der Länge anpassbares und perfekt ausbalanciertes Handstück für eine angenehme Haltung und ermüdungsfreies Behandeln.

Sicher auf alles vorbereitet.

Einfaches Auffüllen dank ebenem Boden zum sicheren Abstellen. Für unterbrechungsfreie Behandlungen kann der Pulverbehälter vorab befüllt und mit einem Gummiverschluss, der die Indikation anzeigt, verschlossen werden.

Drei sind einfach besser.


3-Stufenregulierung mit erster Stufe zum pulverlosen Säubern des Zahnes von Pulverresten. Stufen 2 und 3 mit individuell je Patient und Indikation einstellbarer Reinigungsleistung.

Anschluss finden leicht gemacht.

KaVo oder Sirona Anschluss nach Wahl.



Das reinste Vergnügen. Vor, während und nach der Behandlung.

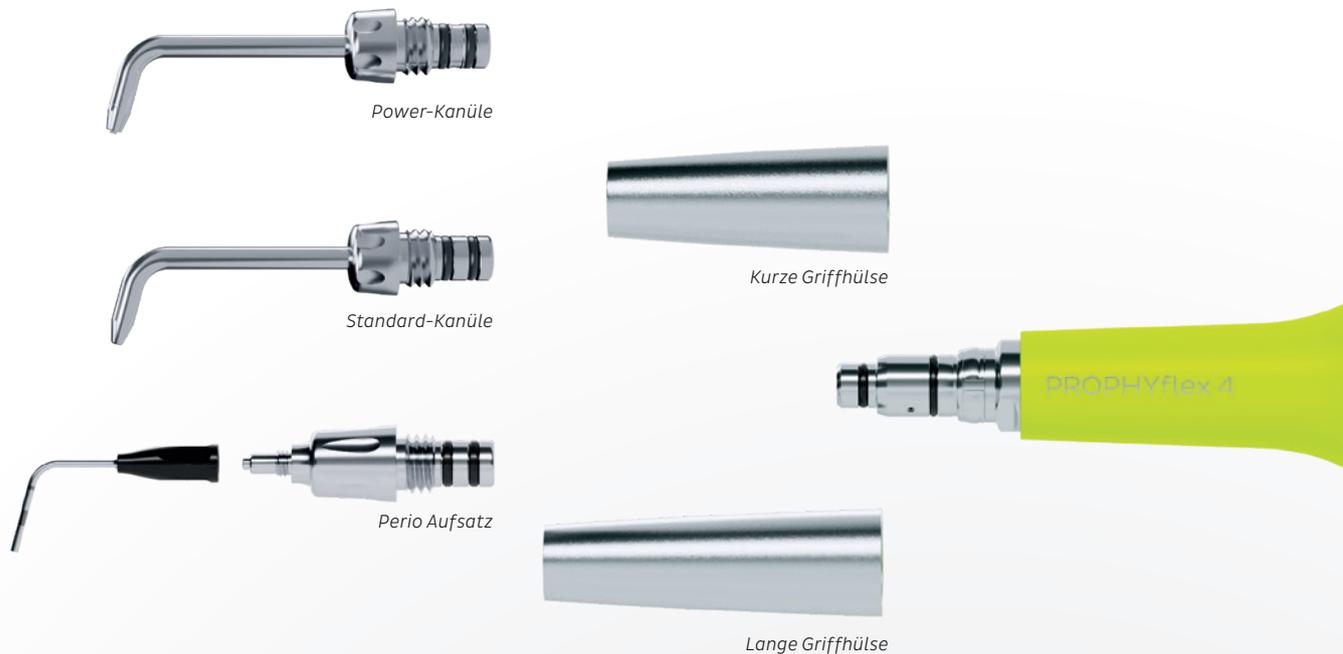


Für bestmögliche Hygiene ist der Gerätekörper des KaVo PROPHYflex 4 absolut nahtlos gearbeitet. Das PROPHYflex 4 ist ganz leicht zerlegbar, einfach zu reinigen und zu desinfizieren sowie sterilisierbar.

Die weiteren Aussichten:
weniger störender Pulvernebel.



Die einstellbare Pulvermenge und der konstante, fokussierte Pulverstrahl der PROPHYflex Standard-Kanüle sorgen für reinste Freude – durch die präzise Reinigungsleistung, die im Bild sichtbare Reduzierung von störendem Pulvernebel und damit optimierte Hygiene.

Hart gegen Flecken,
sanft zum Zahn.

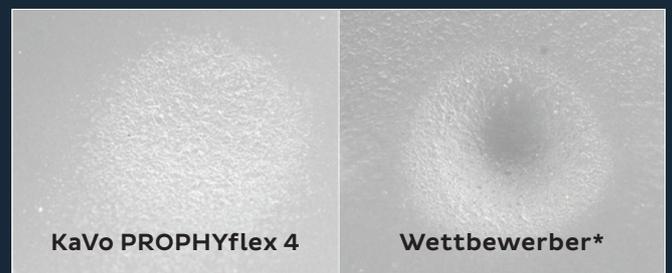

Eine auf die Strahlfläche gleichmäßig verteilte Strahlenergie ist doppelt gut: Je gleichmäßiger die Strahlenergie verteilt wird, umso effektiver ist die Reinigungsleistung und zugleich umso schonender ist es für die Zahnschubstanz.

* Abtrag PROPHYpearls im Vergleich mit Pulverstrahlgerät eines Wettbewerbers mit Calciumcarbonat. Dargestellt auf SonicFill™ Komposit.

Mein Tipp für top Zuverlässigkeit.

„Lassen Sie nach jeder Anwendung und vor jeder Aufbereitung das PROPHYflex 4 aufgesteckt auf der Turbinenkupplung eine Minute mit Wasser und anschließend ohne Wasser durchlaufen. So können Sie sicher sein, dass keine Pulverreste in Ihrem PROPHYflex 4 verbleiben, die es verstopfen könnten. Oder Sie können beim PROPHYflex 4 im Handstück verbliebene Pulverreste über die erste Stufe der 3-Stufenregulierung ausblasen. Nach der anschließenden Aufbereitung ist es wieder für die nächste Behandlung einsatzbereit.“



Annett Preuß

KaVo Kerr Vertriebspezialistin
Instrumente Deutschland



Lime

Wave

Flamingo

Das PROPHYflex 4 steht in drei kräftigen Farben zur Auswahl.

Drei Kanülen, eine patientenindividuelle Behandlung.



Powerkanüle

Durch die drei verfügbaren Kanülen sowie die 3-Stufenregulierung des PROPHYflex 4 kann eine möglichst patientenindividuelle Behandlung verschiedenster klinischer Situationen gewährleistet werden.

Bloß keine Zeit verpulvern: verschließbarer Pulverbehälter.



Mit Deckel verschließbarer Pulverbehälter: Ideal zur Vorbereitung von Behandlungen, bei denen die Wahl des Pulvers an die Indikation angepasst werden soll. Einfach bereits gefüllten Behälter aufsetzen und los geht's.

Weil auch die inneren Werte zählen: Reinigungspulver für das PROPHYflex 4.


PROPHYpearls, PROPHYflex Pulver und PROPHYflex Perio Powder sind perfekt abgestimmt auf das KaVo PROPHYflex 4 und ermöglichen so eine ebenso gründliche wie sanfte Zahnreinigung.



KaVo PROPHYpearls.

Für die rundum saubere und sanfte Prophylaxe.



- Indikation: Effektive Entfernung von Verfärbungen, Plaque und Biofilm.
- Wirkstoff: Calciumcarbonat in Korngröße $\text{\O} 60 - 70 \mu\text{m}$, biologisch abbaubar, ohne Salze, Zucker und Gluten.
- Highlights: Runde Form und einheitliche Größe für optimierte Reinigung bei minimiertem Abtrag, 4 Geschmacksrichtungen und zwei neutrale Varianten.

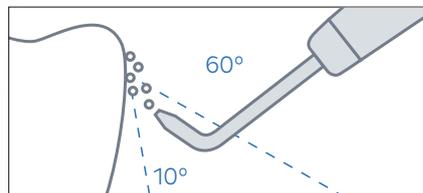

KaVo PROPHYflex Pulver:

Reinigen kann so schnell gehen.

- Indikation: Hocheffektive Entfernung von Verfärbungen, Plaque und Biofilm.
- Wirkstoff: Natriumbicarbonat in Korngröße $\text{\O} 60 - 70 \mu\text{m}$, wasserlöslich.
- Highlights: Einfache, schnelle Behandlung durch besonders starke Wirkung, 4 Geschmacksrichtungen.

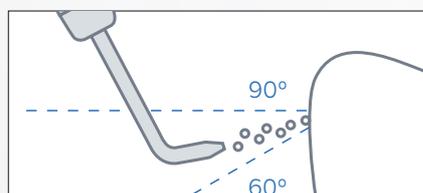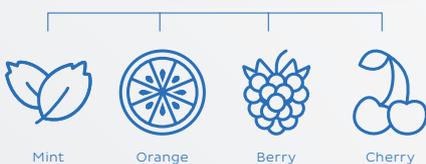

Etwas Anderes kommt nicht in die Tasche: subgingivales Arbeiten mit dem PROPHYflex 4.



Perio Kit und Perio Powder für subgingivales Arbeiten.


Mit dem PROPHYflex 4 müssen Sie für die Umstellung von supra- auf subgingivale Behandlung oder für die Implantatreinigung nicht das Gerät wechseln. Einfach den perio tip aufsetzen, das Perio Powder einfüllen, die passende Leistungsstufe wählen – fertig.

- Sichere, gezielte Taschenreinigung durch die stabile, dünne Spitze des perio tips mit Tiefen-Markierungen.
- Hervorragende Zugänglichkeit dank guter Übersicht und schlanker Form.
- Hygienisch und mehrfach verwendbar: jede Spitze bis zu 10 Zyklen aufbereitbar.



KaVo PROPHYflex Perio Powder: für sub- und supragingivale Behandlungen.

- Indikation: Effizientes Biofilmmangement in Zahnfleischtaschen und Reinigung von Kronen, Brücken und Implantaten.
- Wirkstoff: Feines Glycin-Pulver (18-22 μm), schonend für das Zahnfleisch.
- Highlights: Besonders sanft und wenig abrasiv, abgestimmt auf die effiziente Reinigung der Taschen sowie den supragingivalen Einsatz an Implantaten.

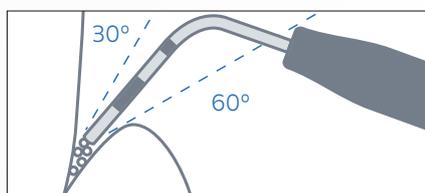

Pulverstrahlen mit KaVo PROPHYflex 4: Herzstück der KaVo Kerr World of Smile.



Ein Lächeln beginnt mit reiner Freude: Das KaVo System zum Pulverstrahlen steht im Mittelpunkt der KaVo Kerr World of Smile. Das ergonomische, flexibel einsetzbare Pulverstrahlgerät KaVo PROPHYflex 4 ist perfekt auf die PROPHYpearls, das PROPHYflex Pulver sowie das PROPHYflex Perio Kit und Perio Powder abgestimmt.

Rundum Freude bei der Prophylaxe machen auch die anderen Produkte von KaVo und Kerr: Von der Patientenvorbereitung für beste Sicht über Produkte für das sanfte, gründliche Scaling sowie Lösungen für die Zahnpolitur bis zu innovativen Geräten zur Kariesfrüherkennung ohne Röntgenstrahlen.

Alle Informationen, Filme und News unter:
www.kavo.com/de/PROPHYflex4





Kerr OptiView™ für die Patientenvorbereitung.

Das flexible 3D-Design des Kerr OptiView ermöglicht ein schnelles und bequemes Anlegen und Entfernen. Die gleichmäßige periorale Retraction sorgt für ungestörte Sicht und freien Zugang zur Mundhöhle. Gerade bei längeren Behandlungen sorgt das für unterbrechungsfreiere, schnellere Abläufe und ist entspannend – sowohl für Patienten als auch für Behandler.



Das KaVo SONICflex für effizientes Scaling.

Egal welche Spitze Sie zur Zahnsteinentfernung, zur subgingivalen Reinigung von Zahntaschen oder Implantaten für das KaVo SONICflex wählen: Der einfache, schnelle Spitzenwechsel, die angenehme und subsatzschonende Behandlung sowie die geringe Wärmeentwicklung und die sanfte Oszillation überzeugen bei jeder Indikation.



Das KaVo System zum einfachen Pulverstrahlen.

Das KaVo Zahnreinigungssystem macht Pulverstrahlen zum reinsten Vergnügen: Das neue, ergonomische und flexibel einsetzbare Pulverstrahlgerät PROPHYflex 4 mit darauf abgestimmten PROPHYpearls und PROPHYflex Pulver oder mit PROPHYflex Perio Kit und Perio Powder sind bei jeder Anwendung ein Grund zum Strahlen – für Sie und Ihre Patienten.



Die KaVo Kerr Lösungen für effiziente Zahnpolitur.

Drei KaVo SMARTmatic Winkelstücke für die Prophylaxe kombiniert mit Kerr Pro-Cup™ zum spritzfreien Auftragen der Kerr Cleanic™ Prophy-Paste aus den praktischen Prophy Clips: Die Symbiose von KaVo und Kerr ermöglicht Ihnen eine besonders effektive Zahnpolitur.



Die KaVo DIAGNOcam zur Kariesdiagnose.

Mit der KaVo DIAGNOcam zur Kariesfrüherkennung erstellen Sie ganz einfach hochpräzise Aufnahmen über die Durchleuchtung des Zahns, ganz ohne Röntgenstrahlen. Diese überzeugenden Bilder sorgen für eine höhere Akzeptanz Ihres Behandlungsplans.

Dental Excellence in jedem Bereich.



Praxisausstattung

KaVo Behandlungseinheiten, Behandlungsleuchten, Behandlerstühle, Patientenkommunikationssystem und weiteres Zubehör für die zahnärztliche Praxis.



Instrumente

Dentale Hand- und Winkelstücke, Turbinen, Pulverstrahlhandstücke und Kleingeräte für alle Anwendungsgebiete von Diagnostik über Prophylaxe bis hin zu Restauration, Chirurgie, Endodontie und Instrumentenpflege.

Die in diesem Katalog gezeigten und beschriebenen Produkte und Ausstattungen sowie Dienstleistungen sind nicht in allen Ländern erhältlich. Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. KaVo Dental GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für Abweichungen in Farbe und Form von den Abbildungen, Irrtümer sowie Druckfehler und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den Prospekten zu machen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der KaVo Dental GmbH.